

MICRONIC

LABWARE:

AB ANALITICA Srl propone innovativi tubi da micropiastra muniti alla base di un **codice a barre bidimensionale** che identifica in modo univoco la provetta. I codici chiamati codici **Datamatrix** consentono la generazione di milioni di combinazioni diverse garantendo unicità del campione.

Il codice viene creato tramite incisioni laser direttamente sulla plastica, assicurando resistenza alle più basse temperature, compreso l'azoto liquido. Ciascun codice è anche concepito per garantire la decodifica del codice stesso anche nel caso venga parzialmente rovinato, tramite la ridondanza dei dati in esso contenuti. Attraverso l'associazione univoca del codice della provetta con i dati del campione è possibile risalire in ogni momento al campione stesso, anche se esso dovesse essere introdotto in una posizione errata della scatola.


Caratteristiche delle provette:

- ✓ Disponibilità di diversi formati da 0,5mL a 7,5mL;
- ✓ Altissima qualità di produzione, perfetta riproducibilità tra provetta e provetta, permettendo anche attività di automazione;
- ✓ Materiale di eccellente purezza (polipropilene) certificato DNA; RNA; DNase; RNase free ed approvato da FDA;
- ✓ Disegnate per essere alloggiare in comodi rack, capaci di garantire risparmio di spazio nei congelatori pari al 35-50% rispetto ai normali metodi di stoccaggio.
- ✓ *Lockable*: ogni provetta viene agganciata al rack, in modo che non possa cadere inavvertitamente.
- ✓ Formato micropiastra 96 provette.



CHIUSURA PROVETTE:

Le provette possono essere chiuse con tappo a vite (resistenti anche all'azoto liquido), oppure con tappo a pressione in silicone (resistenti fino a -80°C).

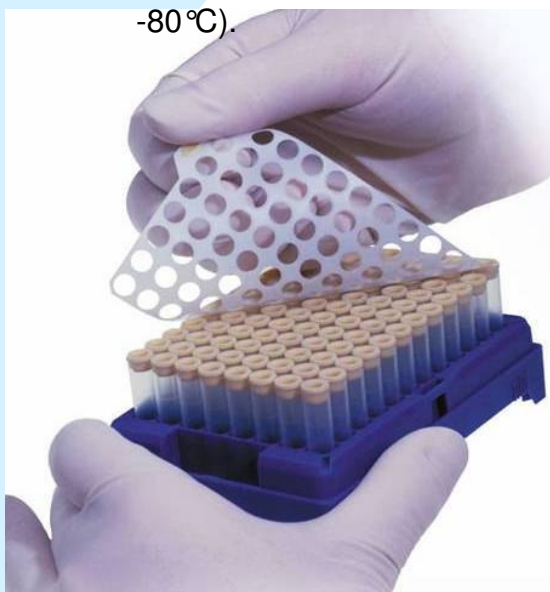


APERTURA PROVETTE:

Le provette con tappo a vite possono essere aperte con uno speciale cacciavite che consente di avvitare e svitare i tappi a vite delle provette senza toccare il tappo con le mani, evitando di contaminare il campione.

Le provette con tappo in silicone possono invece essere aperte con uno speciale dispositivo di rimozione dei tappi che consente di aprire una provetta o otto provette alla volta.



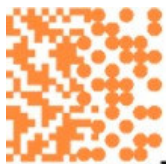

MICRONIC

PROVETTE IN VETRO:

In taluni casi può sorgere l'esigenza di conservare campioni aliquotati in soluzioni particolarmente delicate o aggressive, o di campioni ad elevata attività biologica, per i quali la conservazione in materiale plastico risulta particolarmente rischiosa.


Micronic BV mette a disposizione un'innovativa gamma di provette di vetro particolarmente adatte a questo scopo, con relativi tappi a vite muniti di speciale guarnizione.



CONTENITORI DI TESSUTI:

Grazie all'attento ascolto delle esigenze dei suoi numerosi clienti, **Micronic BV** ha sviluppato un nuovo formato di contenitore da 7,5 mL, unico sul mercato, dedicato a coloro che debbano conservare aliquote di campione voluminoso. L'esempio principale è quello delle anatomie patologiche, la cui esigenza principale non è quella di conservare campioni liquidi, bensì pezzi di tessuto anatomico, e blocchi di inclusione di grandi dimensioni. Anch'essi vengono *barcodati* nel fondo, e all'occorrenza possono essere forniti sterili.



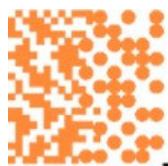

MICRONIC

INFORMAZIONI PER L'ORDINE:

Codice	Descrizione	Confezionamento
MC-MP52325X6	Provette da 0,5 mL con tappo a vite azzurro, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP52351X6	Provette da 0,75 mL con tappo a vite azzurro, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP52319X6	Provette da 1,1 mL con tappo a vite azzurro, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP52330X6	Provette da 1,4 mL con tappo a vite azzurro, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP52315BC	Provette da 7,5 mL con tappo snap, sterili	10 racks da 24 provette
MC-MP54004	Manual Screwcap remover	box/10
MC-MP52325BC	Provette da 0,5 mL senza tappo, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP52351BC	Provette da 0,75 mL senza tappo, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP52319BC	Provette da 1,1 mL senza tappo, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP52330BC	Provette da 1,4 mL senza tappo, sterili	10 racks da 96 provette
MC-MP53001	Tappetino tappi silicone, sterile	10 tappetini da 96 tappi
MC-MP54000	Dispositivo rimozione tappo singolo	box/10
MC-MP54001	Dispositivo rimozione 8 tappi	box/10
MC-MP52900	Provette da 1,2 mL in vetro non sterili	10 racks da 96 provette